



! KKD^{®mf} zahnärztliches Instrumentarium der Spitzenklasse für alle Bereiche der Zahnmedizin – gefertigt aus hochwertigem Spezialstahl, der sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit und Kantenstabilität auszeichnet. Langlebig. Nachfolgend ein Auszug aus unserem umfangreichen Lieferprogramm:

KKD^{®mf} top-quality dental instruments for all dental scopes – made of high-quality special steel which stands out due to extreme corrosion resistance and edge strength. Long-lasting instruments. Please find below a choice of some instruments out of our well-assorted instrument programme:

MUNDSpiegel MOUTH MIRRORS

- Rhodium-Oberflächenverspiegelung
- Klare, verzerrungsfreie Wiedergabe
- Nach allen Verfahren desinfizier- und sterilisierbar
- Ultraschallgeeignet
- Resistent gegen chemische Einflüsse

Mouth Mirrors

- front-surface, rhodium-coated lens
- sharp, distortion-free reflection
- disinfectable and sterilisable all procedures
- suitable for ultrasonic cleaning
- resistant to chemical influences



M 4
18 mm Ø
1 Stück: REF 12712
12 Stück: REF 12714



M 5
22 mm Ø
1 Stück: REF 12713
12 Stück: REF 12715

SPIEGELGriffe MIRROR HANDLES

GG
REF 12721



Massiver Griff aus poliertem Edelstahl/ compact handle made of stainless steel

Edelstahl
REF 12722



6-Kant-Hohlgriff aus poliertem Edelstahl/ Brass-chrome plated hollow handle, hexagonal

Ergo
REF 12723



Ergonomischer Griff aus Edelstahl für ermüdungsfreies Arbeiten/ Anatomically shaped handle for minimum finger fatigue; top-quality stainless steel

ZAHNÄRZTLICHE Pinzetten DRESSING PLIERS

DP-2 College
L: 16 cm
REF 12182



kurze Spitzen/ short tips

DP-17
L: 15,5 cm
REF 12184



DP-18
L: 16 cm
REF 12185



ENDO-Pinzette
L: 16 cm
REF 12179



Mit Schloß und eingearbeiteter Nut zur sicheren Fixierung von Guttapercha-Spitzen/ Locking, horizontal and vertical grooves for secure holding of gutta-percha points

DIAGNOSTIK


DIAGNOSTICS



SONDEN EXPLORERS

Sonden aus hochwertigem Spezialstahl mit hochflexiblen, bruchsicheren Arbeitsenden.
Zur Diagnostik von Karies und Zahnstein und der Untersuchung von Zahnfleischtaschen, Füllungen etc.

Einendige Sonden/ single end

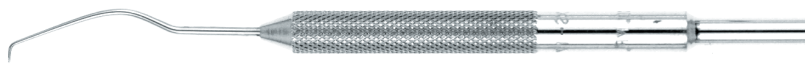

EX-S 17 REF 12455 Häkchensonde

Häkchensonde zur Feststellung von Konkrementen an der Wurzeloberfläche und zur Abtastung von Kronen- und Brückenrändern
hook-shaped - for calculus detection on root surfaces and palpating crown and bridge margins



EX-S 23 REF 12456 Sichelsonde

Sichelsonde zur Feststellung von kariösen Läsionen im supragingivalen Bereich in allen Quadranten
sickle-shaped - for detection of carious lesions in supra-gingival areas in all quadrants



EX-S 6 L REF 12453 Abgewinkelt, lang

Zur Feststellung von kariösen Läsionen im supragingivalen Bereich in allen Quadranten
for detection of carious lesions in supra-gingival areas in all quadrants. Angular, long

Doppelendige Sonden/ double end

zur Feststellung von Konkrementen an der Wurzeloberfläche und kariösen Läsionen. Häkchen-/Sichelform
for detection of calculus on root surfaces and of carious lesions. Hook-/sickle-shaped



EX-D 5 REF 12446 Universalsonde

PARODONTOMETER PROBES

Mit kugelförmigem Arbeitsende (Ø 0,5 mm). Erlaubt ein feinfühliges Er tasten subgingivaler Konkreme nte und Rauigkeiten. Beim Vermessen der Taschentiefe wird ein Einreißen des zarten Saumepithels nahezu ausgeschlossen
with ball-shaped working-end (Ø 0.5 mm). For sensitive detection of subgingival concretions. Surveying the pocket depth, a tearing of the epithelial ridge is nearly impossible.

Farbkodierung
colour-coding
3,5 - 5,5 - 8,5 - 11,5 mm



P-WHO 11,5 REF 12837 Parodontometer

Farbkodierung
colour-coding
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 mm

Zur exakten Vermessung der Taschentiefe/ *for exact measuring of the pocket depth*





P-UNC 15 REF 12842

Farbkodierung
colour-coding
3-6-8-11 mm




P-CP 11 REF 12795

GRAM-Parodontometer

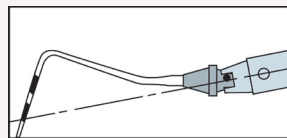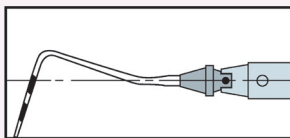

YDM – Spezialparodontometer zum druckkontrollierten Messen nach Richtlinien der WHO. Vermeidet Messfehler bei zu hohem Messdruck durch Rückstellung des Parodontometerkopfes.

YDM – special probes for pressure-controlled measuring according to requirements of the WHO. Measuring errors because of too high pressure are avoided since the head of the probe advances backward

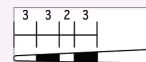

#5 (PCP11) REF 12460



CPITN-C (P-WHO) REF 12461



Furkationsmesssonden

Zur Untersuchung von Furkationsbereichen/ *for the detection of furcations*



P-2N REF 12773 Nabers-Sonde in Sichelform/ *sickle-shaped*


Farbkodierung nach Nabers:
3-6-9-12 mm



P-2N CC REF 12772 Nabers-Sonde mit Farbkodierung/ *colour-coding type Nabers 3-6-9-12 mm markings*

SPEZIALPINZETTEN

SPECIAL PLIERS

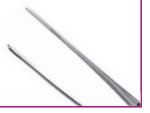


CHIRURGISCHE Pinzetten TISSUE PLIERS

EASYClean


- mit mattiertem aufgerauhtem Deluxe-Gomel-Rundgriff
- für sicheres und schonendes Fassen von Gefäßen, Gewebe und Nahtmaterial durch grazile Microdorn-Ausführung
- zur Stabilisierung von Gewebelappen beim Legen der Naht
- lange ergonomische Griffvariante (18 cm)

- with matt finished and sand blasted Deluxe-Gomel-Round handle
- for secure and gentle gripping of vascular, tissue and suture material due to the gracile micro thorn design
- for stabilising the tissue flaps when placing the suture
- long ergonomic handle (18 cm)

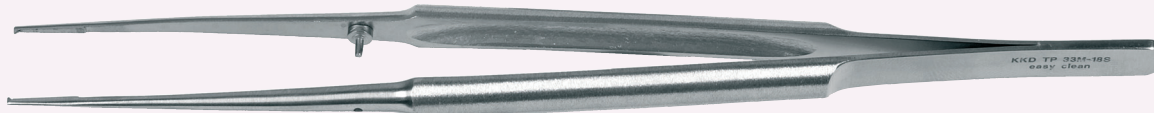

mit Dorn/ with micro thorn

gerade/ straight
L: 18 cm
TP33M18s
REF 13705

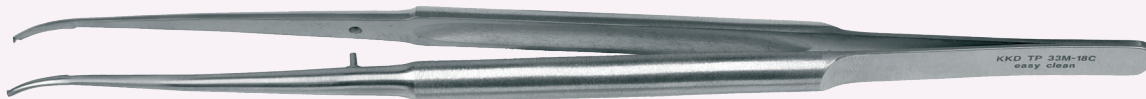


mit Dorn/ with micro thorn

gebogen (45°)
curved
L: 18 cm
TP33M18c
REF 13706


SEMKEN-Taylor - mit Dorn / Surgical pliers with thorn

gerade/straight
1x2-2 mm

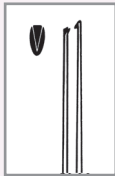

TP-33
L: 12,5 cm
REF 13672

micro-schmal/ micro thin
gerade/straight
1x2-1 mm

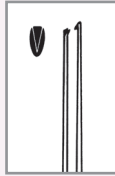

TP-33M
L: 12,5 cm
REF 13669



TASCHENMARKIERUNGS-Pinzetten / Periodontal Pocket Markers Goldman Fox



PM-GF2 rechts/ right L: 14,5 cm REF 12835



PM-GF1 links/ left L: 14,5 cm REF 12834

KKD^{mf} U-FIXPLIERS - Klemmpinzette - EASYCLEAN


Spezialpinzette zur sicheren Fixierung von Wattekügelchen oder Schaumstoffpellets bei der Trocknung von Kavitäten, der Medikamentenapplikation und Vitalitätsprüfung.

Special pliers for secure fixing of cotton rolls and pellets during the drying of cavities, the application of medicaments and vitality tests.

U-Fixpliers
REF 13710



ANATOMISCHE Pinzetten ANATOMIC PLIERS

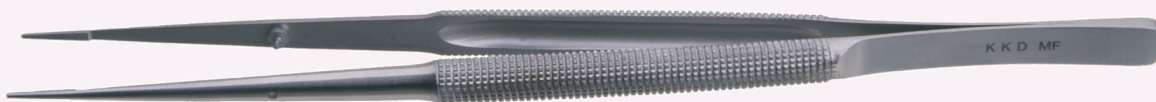

gerade/ straight
L: 18 cm
REF 13708



gebogen (45°)
curved
L: 18 cm
REF 13709